


ANIOSYME FIRST

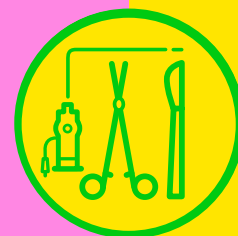

Nettoyage et désinfection sous mousse de l'instrumentation
Limpieza y desinfección de la instrumentación por espuma

Indication

Nettoyage et désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale :
- Lors d'un transport en mode non humide
- Avant nettoyage en machine
Maintient une humidité suffisante pour éviter le séchage du sang et autres matières organiques.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Pulvériser ANIOSYME FIRST sur l'instrumentation. Ne pas dépasser une heure de contact. Rincer abondamment. Procéder au nettoyage et à la désinfection.

Composition qualitative

Propionate d'ammoniums quaternaires,
Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide,
alcools gras éthoxylés, iminodisuccinate de sodium,
protéases, lipases, amylases, agents stabilisants.

Propriétés technologiques

- Solution limpide incolore
- pH : $8,7 \pm 0,5$
- Densité : $1,038 \pm 0,002$
- Non corrosif vis à vis des métaux

Propriétés microbiologiques

ANIOSYME FIRST est conforme aux normes Européennes d'efficacité antimicrobienne :
- NF EN 1040 : Bactéricide
- pr EN 13727, NF EN 1276 : Bactéricide en présence de substances interférentes (conditions de saleté) en 5 minutes
- NF EN 1275 : Activité fongicide vis-à-vis de *Candida albicans*.
- pr EN 14561 : Bactéricide (méthode porte germes)

Précautions d'emploi

Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Ne pas respirer le produit issu de la pulvérisation. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Conserver hors de la portée des enfants.

Information

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conditionnement

12 pulvérisateurs de 750 ml.....Réf. 1410.241

laboratoires



ANIOS

Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes · France
Tel. +33 3 20 67 67 67
Fax : +33 3 20 67 67 68

Indicaciones

Limpieza y desinfección del instrumental médico-quirúrgico : durante el transporte en medio no húmedo o antes de la limpieza en máquina. Mantiene la suficiente humedad para evitar el secado de la sangre y otras materias orgánicas.

Modo de empleo

Producto listo para usar. Pulverizar sobre la instrumentación. No exceder una hora de contacto. Aclarar abundantemente. Proceder a la limpieza y desinfección del material.

Composición cualitativa

Propionato de amonios cuaternarios, clorhidrato de polihexametileno biguanida, alcoholes grasos etoxilado, iminodisuccinato sódico, proteasas, lipasas, amilasas, agentes estabilizadores.

Características tecnológicas

- Solución limpida incolora
- pH : $8,7 \pm 0,5$
- Densidad : $1,038 \pm 0,002$
- No corrosivo frente a los metales

Características microbiológicas

ANIOSYME FIRST está conforme con las normas Europeas de eficacia antimicrobiana:
- AE EN 1040 : Bactericida
- pr EN 13727, AE EN 1276 : Bactericida en la presencia de sustancias interferentes (condiciones de suciedad) en 5 minutos
- AE EN 1275 : Actividad fungicida sobre *Candida albicans*.
- pr EN 14561 : Bactericida (método de puerta gérmenes)

Precauciones de uso

Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves. No respirar el producto nacido de la pulverización. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta). Manténgase fuera del alcance de los niños.

Información

Datos de seguridad disponible previa petición.

Envase

12 pulverizadores de 750 ml.....Ref. 1410.241